


Описание весов

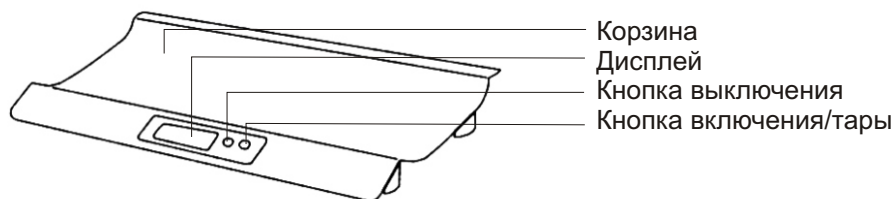

Перед использованием весов

lb kg Весы могут иметь переключатель единиц взвешивания (фунты или килограммы), находящийся снизу.

Установка батареек

Откройте крышку отсека для батареек и вставьте батарейки из комплекта поставки, соблюдая полярность.

Примечание: Для более продолжительной работы используйте алкалиновые батарейки. Не используйте одновременно батарейки разных типов, а так же разряженные батарейки.

Важные примечания

Err

При нажатии на кнопку “On/Tare” (включение/тара) не держите ее долго. Это может привести к появлению символа “Err” на дисплее.

Не устанавливайте весы вблизи отопительных приборов, а также в местах с высокой влажностью или значительными колебаниями температуры.

Никогда не опускайте весы в воду и не проливайте на них химические растворы. Для очистки весов используйте мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве.

Не допускайте ударов и вибрации.

Если весы не используются длительное время, то выньте из них батарейки.

Измерение

- Включите весы кнопкой “on/tare”.
- На дисплее высветятся символы “88888”.
- Дождитесь появления на дисплее индикации “0 0.0”.
- Положите ребенка на весы не позже, чем через 60 секунд.
- На дисплее отобразится масса ребенка.
- Через несколько секунд после окончания взвешивания монитор покажет “0 0.0” и выключится автоматически (через 3 секунды).

Функция тары

- Данная функция позволяет измерять реальный вес ребенка, даже если он лежит на полотенце или толстой пеленке.
- Включите весы.
- Положите пеленку (или полотенце).
- Повторно нажмите кнопку “on/tare”.
- Положите ребенка на весы.

Примечание: Если общий вес ребенка и пеленки превышает 20 кг, монитор покажет “OL”.

Замена батареек

Если на дисплее появилась надпись “Lo”, батарейки разряжены и их необходимо заменить.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Гарантийный срок службы установлен в соответствии со статьями №470 и №471 ГК РФ и статьей №19 пункт 3 "О защите прав потребителей" (с изменениями от 30 дек. 2001 года).

Гарантия распространяется на все неполадки и недоделки, возникшие в результате конструктивных (производственных) дефектов, о которых поставщик был поставлен в известность до истечения гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на все неполадки и повреждения, причиненные покупателем в результате неправильного использования, самовольного вскрытия, небрежного обращения при использовании, хранении и перевозке.

Гарантия не распространяется на механические элементы и элементы питания.

Весы принимаются к гарантийному обслуживанию в сервисном центре ООО "СИМС-2" только при наличии правильно заполненного гарантийного талона (см. ниже) с печатью торгующей организации.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы прибора равен 10 годам при условии, что прибор используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по применению.

Утилизация

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать.

Распорядитесь старым прибором в соответствии с местным законодательством.

Tanita Corporation, Токио, Япония

1-14-2, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo, Japan, tel: +81(0)-3-3968-2123

ООО «СИМС-2»

125459, г. Москва, ул. Новопоселковая д. 6, к. 7, тел.: +7 (495) 792-31-90

Гарантийный талон

Дата продажи _____

Подпись продавца _____


М.П.

TANITA



СИМС-2

Детские медицинские электронные весы

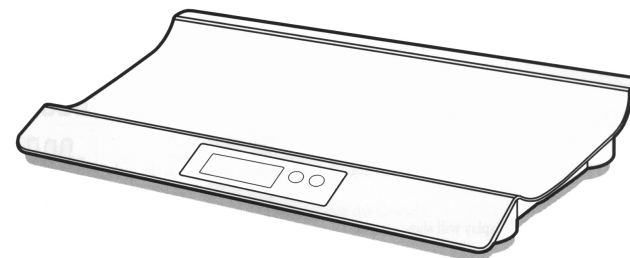

Руководство по эксплуатации BD-585, BD-590, TL-120, TL-150A, 1582, 1583, 1584



Регистрационное удостоверение Минздрава РФ
№ 2003/1365 от 2 октября 2003 г.